



NX3 Nexus™ Dritte Generation

Universeller adhäsiver Dental-Kompositzement

Eine neue Generation permanenter Zemente

NX3 ist ein permanentes Kompositzementssystem mit einer innovativen Chemie für unerreichte Ästhetik, Haftkraft und Vielseitigkeit. Als Entnahmesystem stehen wahlweise eine Automix-Spritze für dualhärtende Indikationen oder ein lichthärtender Zement mit unbegrenzter Verarbeitungszeit für mehrgliedrige Versorgungen zur Verfügung. Der selbstmischende dualhärtende Zement kann für alle indirekten Anwendungen einschließlich Veneers verwendet werden.

Anwender-Feedback:

“Farbstabilität, Benutzerfreundlichkeit und einfache Versäuberung, Farbübereinstimmung und optimale Haltbarkeit sind einige der Attribute, die bei der Auswahl eines Zements wichtig sind - NX3 erfüllt alle diese Erwartungen.”

– Mitch A Conditt, DDS

Forschungsergebnisse

Die meisten selbsthärtenden oder dualhärtenden Kompositzemente verwenden ein Paar aus Benzoylperoxid und tertiärem Amin, um die Polymerisation und Aushärtung zu initiieren, was im Laufe der Zeit aufgrund der Inkompatibilität mit selbstätzenden Adhäsiven zu Verfärbungen führt. Mit einem aminfreien Redox-Initiatorsystem und einer optimierten Matrix ist NX3 nun der erste wirklich farbstabile adhäsive Kompositzement mit verbesserter Haftkompatibilität sowohl für Total-Etch- als auch für Self-Etch-Adhäsive.

Eigenschaften

- **Ausgezeichnete Haftung:** Haftet auf allen Substraten. Ausgezeichnete Haftung an Dentin, Schmelz, CAD/CAM-Blöcken, Keramik, Komposit und Metall.
- **Für Self-Etch- oder Total-Etch-Technik:** Kompatibel mit allen Bonding-Protokollen. Kein dualhärtender Aktivator erforderlich.
- **Hervorragende Farbstabilität** für langfristige Ästhetik mit Dual- oder Lichthärtung

Bestellinformationen

Automix-Spritze dualhärtend, 5 g

- 33643** Clear
- 33644** White
- 33645** Yellow
- 33646** Bleach
- 33647** White Opaque


Spritze lichthärtend, 1,8 g

- 33648** Clear
- 33649** White
- 33650** Yellow
- 33651** Bleach
- 33652** White Opaque

Zubehör


- 33655** 50 Automix-Spitzen

Farbstabilität von dualhärtenden Kompositzementen – Klarer Farbton

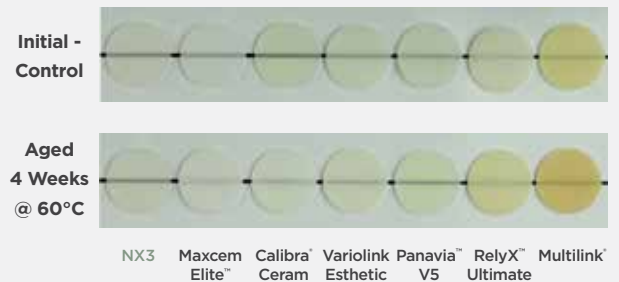

Die Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Daten auf Nachfrage verfügbar.

Indirekte Haftfestigkeit zu Dentin (Bond Compatibility)

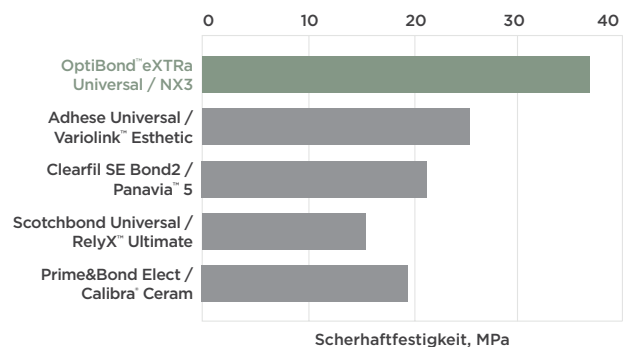

Die Kombination von Kerr OptiBond eXTRA Universal/NX3 Zement liefert im Vergleich zu führenden Wettbewerbern* nachweislich eine überragende Haftfestigkeit zum Dentin und hervorragende Ergebnisse auf verschiedenen Substraten, ohne dass zusätzliche Hilfsprodukte erforderlich sind, und kombiniert ein vorhersehbares Ergebnis mit der Einfachheit eines einheitlichen Protokolls. Daten auf Nachfrage verfügbar.

*Verglichen mit Adhese™ Universal/Variolink II, Clearfil SE Bond 2/Panavia 5, Scotchbond™ Universal/RelyX Ultimate, Prime und Bond™ Elect/Calibra Ceram, Monoond Plus/Variolink Esthetic DC. Die Proben wurden nach den jeweiligen der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers hergestellt.